


# Aufsatzabsaugung mit Aktivkohle AK-AAS-600

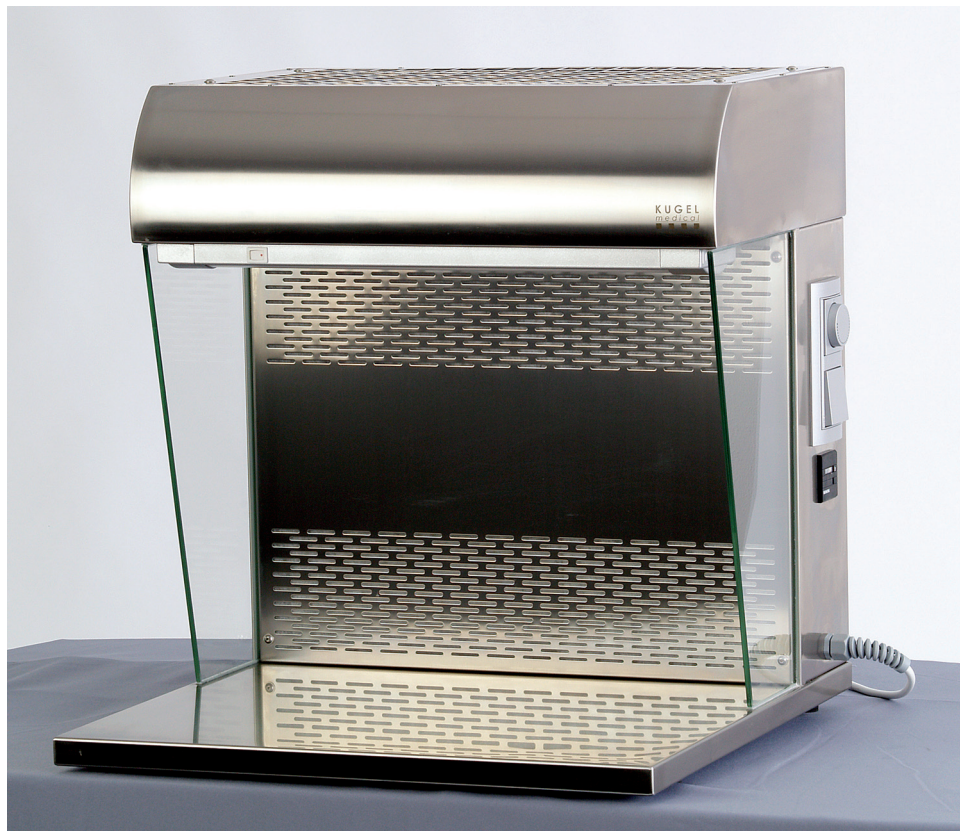

Die stabile Konstruktion ist komplett aus geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304) gefertigt und zur direkten Montage auf einem vorhandenen Arbeitsplatz geeignet. Die Luft wird über der gesamten Arbeitsfläche nach hinten abgesaugt. Dadurch optimale Beseitigung Gesundheitsschädlicher Dämpfe. Die Aufsatzabsaugung ist mit einem Aktivkohlefilter ausgestattet und arbeitet im Umluftbetrieb.

Links und rechts eine Glasabschottung aus ESG Sicherheitsglas in abgeschrägter Form.

- Inkl. Beleuchtung an der Oberseite
- Inkl. Stufenlosem Drehzahlregler sowie Betriebsstundenzähler

#### Technische Details:

Maße B/T/H:	600 x 600 x 628 mm
Abluftmenge:	ca. 200 m <sup>3</sup> /h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 - ANSI 304)
Typ:	AK-AAS-600
Artikel-Nr.:	060.021.200

**KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH**  
Hermann-Köhl-Str. 2A  
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)



**KUGEL**  
medical  
■ ■ ■ ■