


Einbauarbeitsplatz mit Luftabsaugung zur Tischmontage

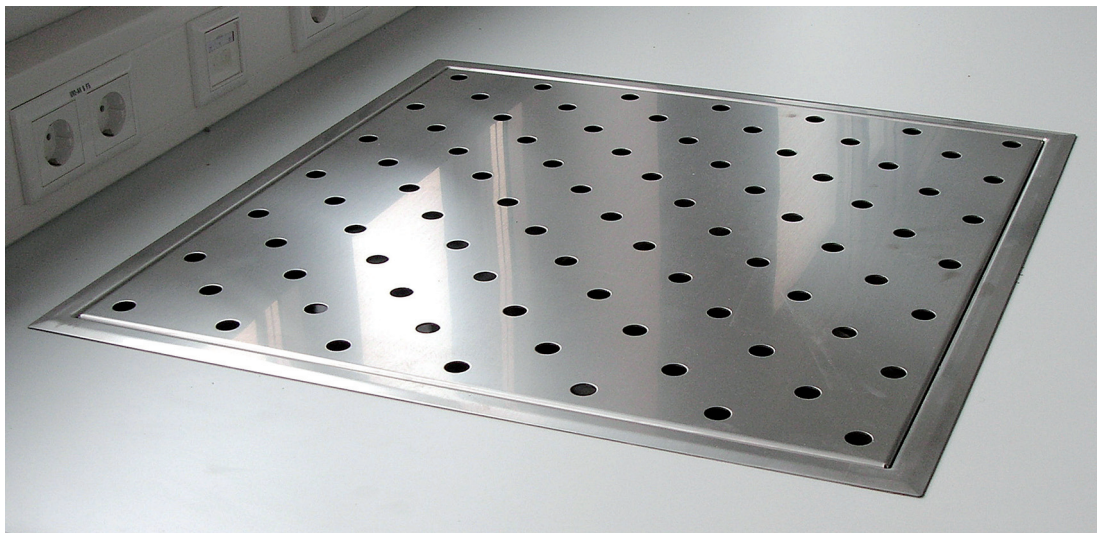

Spezialarbeitstisch für garantiert schadstoffreies Arbeiten mit histologischen Präparaten. Die Luft wird über der gesamten Arbeitsfläche nach unten abgesaugt, dadurch ist eine optimale Beseitigung gesundheitsschädlicher Dämpfe gewährleistet. Die MAK-Werte für Formalin werden im gesamten Absaugbereich unterschritten. Der Einbauarbeitsplatz ist an eine bauseitige Abluftanlage anzuschließen.

- Komplette Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304)
- Sehr stabile perforierte Einlegebleche Lochung D17, T60
- Luftgeschwindigkeit an den perforierten Einlegeblechen min. 0,4/sec
- Anschlussstutzen für Abluft senkrecht nach unten

Technische Details:

Maße B/T/H:	600 x 400 mm
Abluftmenge:	Min. 200 m ³ /h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304)
Abwasseranschluss:	DN 50
Abluftanschluss:	DN 150
Typ:	EBA-600
Artikel-Nr.:	060.010.060

Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■

Einbauarbeitsplatz mit Luftabsaugung zur Tischmontage

Modell EBA 800:

Maße B/T/H:	800 x 500 mm
Abluftmenge:	Min. 350 m ³ /h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304)
Abwasseranschluss:	DN 50
Abluftanschluss:	DN 150
Typ:	EBA-800
Artikel-Nr.:	060.010.070

Modell EBA 1000:

Maße B/T/H:	1000 x 600 mm
Abluftmenge:	Min. 500 m ³ /h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304)
Abwasseranschluss:	DN 50
Abluftanschluss:	DN 200
Typ:	EBA-1000
Artikel-Nr.:	060.010.080

Modell EBA 1700:

Maße B/T/H:	1700 x 600 mm
Abluftmenge:	Min. 600 m ³ /h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (Material Nr. 1.4301 - ANSI 304)
Abwasseranschluss:	DN 50
Abluftanschluss:	2x DN 150
Typ:	EBA-1700
Artikel-Nr.:	060.010.090

Hinweis:

Unsere Einbauarbeitsplätze können wir Ihnen auch ganz individuell in den von Ihnen gewünschten Maßen anfertigen.

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■