


# Entsorgungsstation für Formalin

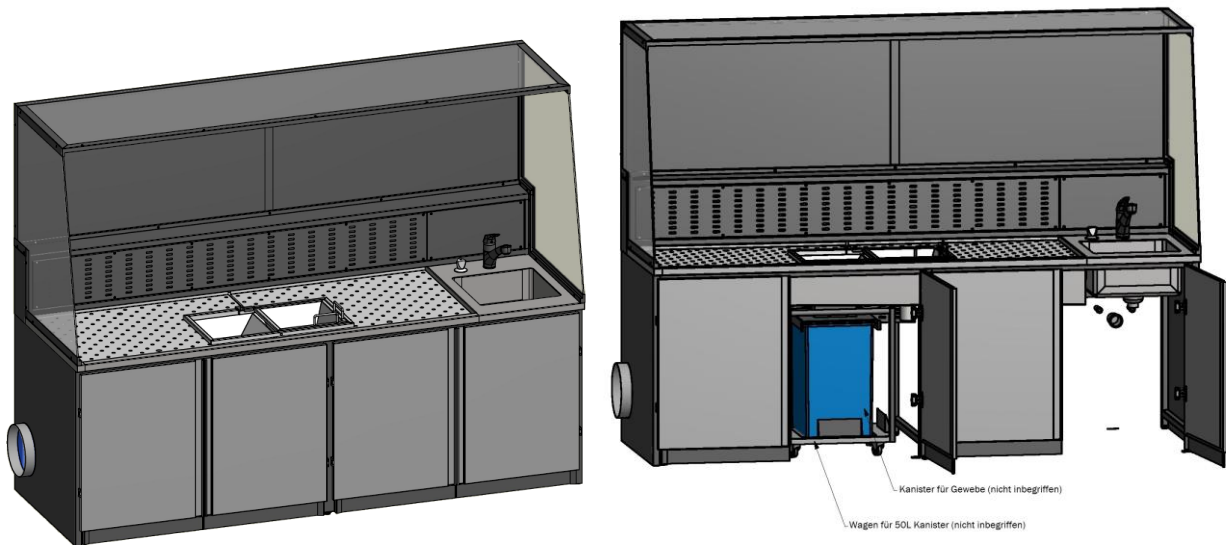

Fotos oben: Entsorgungsstation for Formalin Typ ESS-2500

Spezialarbeitstisch mit integrierter Luftabsaugung zur Entsorgung von Gewebeproben und Altformalin. Die Luft wird über der gesamten Arbeitsfläche nach hinten und unten abgesaugt, dadurch ist eine optimale Beseitigung gesundheitsschädlicher Dämpfe gewährleistet. **Die AWG-Werte für Formalin werden im gesamten Absaugbereich unterschritten.** Der Arbeitstisch ist an eine bauseitige Abluftanlage anzuschließen.

- Stabiler selbsttragender Unterbau in geschlossener Ausführung mit Flügeltüren
- Im Bereich der Lochbleche ein herausnehmbares Trennsieb (mit Klappmechanismus) zur Trennung von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Arbeitsfläche mit nahtlos eingeschweißtem Becken 400 x 400 x 200 mm mit Standrohrventil
- Becken mit integrierter Luftabsaugung wahlweise rechts oder links angeordnet (außer ESS-1200: Waschbecken nicht im Lieferumfang enthalten!)
- Mischbatterie mit ausziehbarer Handbrause
- Sehr stabile perforierte Einlegebleche (ca. 10 mm tiefer als Rand) Lochung D17, T60
- Luftgeschwindigkeit an den perforierten Einlegeblechen min. 0,4 m/sec
- Integrierter Abluftstutzen mit Volumenstromregelung
- Integrierte Sprinkleranlage unterhalb der perforierten Einlegebleche mit Regelventil
- Anschlussstutzen für Abluft wahlweise rechts oder links
- inkl. 3-seitigem Oberaufbau aus Plexiglas
- inkl. 20 Liter Kanister für Altformalin mit Füllstandsmelder
- Kanister für Gewebereste ist nicht im Lieferumfang enthalten
- Augendusche mit Duschkopf am Tisch montiert

## Technische Details:

Maße B/T/H:	1200 x 850 x 850 mm
Abluftmenge:	min. 1000 m <sup>3</sup> /h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 - ANSI 304)
Kalt/Warmwasseranschluss:	DN 15
Abwasseranschluss:	DN 50
Abluftanschluss:	DN 200
Typ:	ESS 1200
Artikel Nr.:	060.100.008

**KUGEL medical GmbH & Co. KG**  
Hermann-Köhl-Str. 2a  
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)



# Entsorgungsstation für Formalin



Individuelllösung mit Doppelwaschbecken, Desinfektionsautomat und Arbeitstisch



Entsorgungsstation mit Trennsieb sowie Luftabsaugung nach Hinten und unten



Trennsieb zum Abscheiden von Feststoffen und Formalin



Abfallbehälter für Feststoffe / 60 Liter Tank mit Altformalinpumpe mit automatischem Pumpsystem (Individuelllösung)



**KUGEL medical GmbH & Co. KG**  
Hermann-Köhl-Str. 2a  
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)

zertifiziert nach  
**ISO 9001**

**KUGEL**  
*medical*

# Entsorgungsstation für Formalin

## Weitere Modelle:

### Entsorgungsstation ESS-1500:

Maße B/T/H:	1500 x 850 x 850 mm
Abluftmenge:	min. 1200 m <sup>3</sup> /h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 - ANSI 304)
Kalt/Warmwasseranschluss:	DN 15
Abwasseranschluss:	DN 50
Abluftanschluss:	DN 200
Typ:	ESS 1500
Artikel Nr.:	060.101.100

### Entsorgungsstation ESS-1750:

Maße B/T/H:	1750 x 850 x 850 mm
Abluftmenge:	min. 1500 m <sup>3</sup> /h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 - ANSI 304)
Kalt/Warmwasseranschluss:	DN 15
Abwasseranschluss:	DN 50
Abluftanschluss:	DN 200
Typ:	ESS 1750
Artikel Nr.:	060.100.000

### Entsorgungsstation ESS-2000:

Maße B/T/H:	2000 x 850 x 850 mm
Abluftmenge:	min. 1600 m <sup>3</sup> /h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 - ANSI 304)
Kalt/Warmwasseranschluss:	DN 15
Abwasseranschluss:	DN 50
Abluftanschluss:	DN 200
Typ:	ESS 2000
Artikel Nr.:	060.101.120

### Entsorgungsstation ESS-2500:

Maße B/T/H:	2500 x 850 x 850 mm
Abluftmenge:	min. 1800 m <sup>3</sup> /h
Material:	Geschliffenes Edelstahl (1.4301 - ANSI 304)
Kalt/Warmwasseranschluss:	DN 15
Abwasseranschluss:	DN 50
Abluftanschluss:	DN 200
Typ:	ESS 2500
Artikel Nr.:	060.100.005

**KUGEL medical GmbH & Co. KG**  
Hermann-Köhl-Str. 2a  
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0  
Telefax 09 41/20 86 48-29  
[www.KUGEL-medical.de](http://www.KUGEL-medical.de)

